


IWAKI

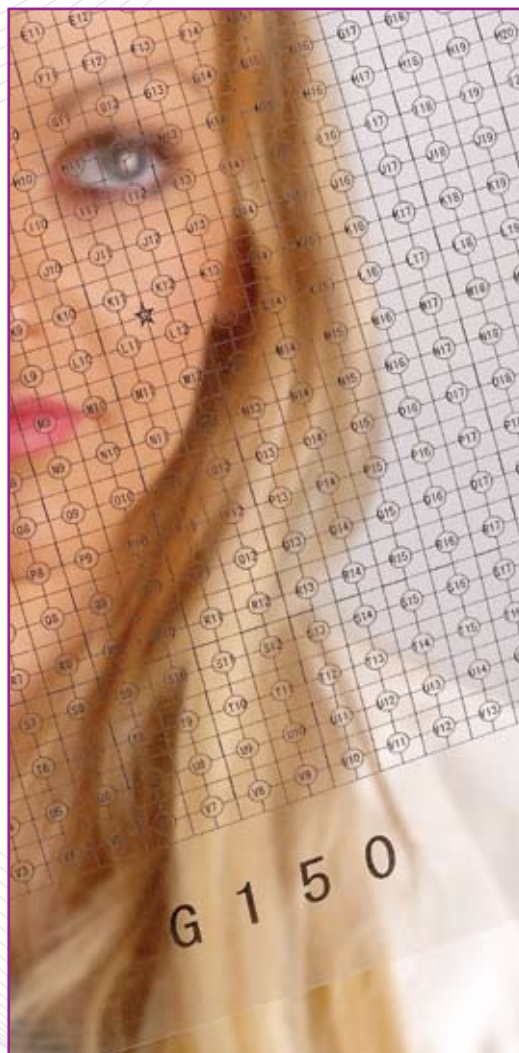

Piastre con vetrino da 35 mm con fondo grigliato

Piastre Iwaki con vetrino da 35mm con fondo grigliato

- La griglia stampata aiuta a localizzare le cellule e non interferisce con la loro crescita.
- Spessore del vetro $0.175\text{mm} \pm 0.02\text{mm}$
- Ideale per uso in microscopia laser confocale
- La griglia ha un passo di $150\mu\text{m}$ su un quadrato da 12mm
- Imballate singolarmente e fornite sterili

Le nuove piastre con vetrino da 35mm IWAKI sono ora disponibili con un fondo stampato con griglia per individuare singole cellule come funzione del tempo di coltura. La griglia è impressa a stampa e non stampata a rilievo, pertanto non interferisce con la crescita delle cellule. Le dimensioni della piastra e del vetrino con griglia sono idonee alla maggior parte delle applicazioni.



Piastre Iwaki da 35mm con coperchio (sinistra) e dettaglio ingrandito della griglia (destra)

Sterilin[®]
Limited

Bibby Scientific Italia s.r.l.

Via Alcide De Gasperi n.56
20070 Cerro al Lambro (MI)

Contatti:

Tel +39 02 98230679

Fax +39 0298230211

E-mail:

marketing@bibby-scientific.it

Web:

www.bibby-scientific.it

Informazioni tecniche e per l'ordine

Codice Prodotto	Descrizione	Quantità per cf.
3922-035	Piastre da 35mm con fondo grigliato in vetro	20

Sterilin **IWAKI**

Sterilin **Sterilin**
PACKAGING PRODUCTS SILICONE DEVICES